



Altura del usuario
700-1350 mm



Peso máximo
80 kg



Entorno
Indoor only



Gazelle PS[®]

Gazelle "PS", éstas son las siglas de prono y supino. Esto significa que los niños pueden utilizar Gazelle PS en ambas posiciones tanto boca arriba (supino) como boca abajo (prono). Gazelle PS está disponible en 3 tallas.

Lo más destacado de Gazelle PS



Inclinación vertical/horizontal

Gazelle PS pasa de posición vertical a horizontal, de 90° hasta la - 15°. Esta es una posición excelente para la terapia respiratoria y el drenaje postural.



Los accesorios son fáciles de intercambiar, para mayor comodidad de los cuidadores



Reposapiés multiajustables

Las articulaciones esféricas de los reposapiés permiten un mejor posicionamiento y soporte de casi cualquier ángulo tobillo/pie.



Abducción de piernas manual

Se consigue gracias a un movimiento anatómicamente correcto que ayuda a encajar la cabeza del fémur en el acetábulo. Se puede ajustar tanto a una como a las dos piernas en el ángulo óptimo.



Estándar

Reposapiés multiajustable, soportes de rodilla, soporte plegable para soporte posterior, soporte posterior extraíble, cinturón de seguridad, ruedas giratorias con freno, abducción manual de piernas, inclinación de posición vertical a horizontal, soporte laterales y/o pectorales ajustables.

Opciones

Tallas

- Talla 1
- Talla 2
- Talla 3

Colores del chasis



Amarillo
para talla 1



Verde para
talla 2



Azul para
talla 3



Gazelle PS estándar se distribuye con soporte de pecho, reposapiés y cinchas para pies.
Por favor consulte los accesorios opcionales.

Medidas

		1	2	3
	Altura del usuario del suelo a las axilas	450-950 mm	600-1050 mm	700-1250 mm
	Carga máxima	40 kg	60 kg	80 kg
	Ángulo (inclinación)	90 - -15°	90 - -15°	90 - -15°
	Longitud	760 mm	880 mm	990 mm
	Anchura total	480 mm	580 mm	650 mm
	Altura total	760 mm	800 mm	900 mm
	Peso	20 kg	22 kg	24 kg

Medidas adicionales en nuestra web

Accesorios

1



Reposacabezas (prono)
88124-xx

2



Adaptador para reposacabezas (supino)
88130

3



Reposacabezas con apertura facial
88117-x

4



Reposacabezas anatómico con apertura facial
88119-x

5



Soportes laterales rectos
88055-x

6



Soportes laterales, interiores
88075-x

7




Soportes laterales, exteriores
88065-x

8



Cojín extra tercera plataforma
88106-x

9

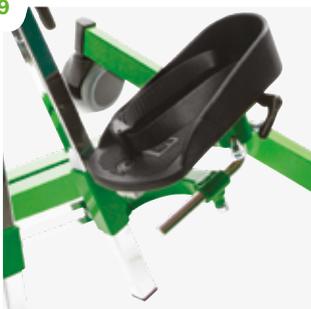

Flexión para extremidad inferior
88165-x

10



Cinchas para soportes laterales
88250-x

11



Mesa de madera
88113-x

12



Mesa de plástico con cubeta y tapa
88108-x

Medidas adicionales en nuestra web